

EINRICHTUNG DER SCHNITTSTELLE ZU DENTAL VISION


Version: 1.1



Dental Vision It. Herstellerangabe installieren und nach dem 1. Aufruf die Lizenzierung vornehmen.

Einstellungen im DS-Win

DS-Win starten → Einstellungen → Sonstige Einstellungen → Externe Programme → aus der Liste "Dental Vision" auswählen → Button "eigene Schaltfläche" betätigen → mit OK Dialog verlassen

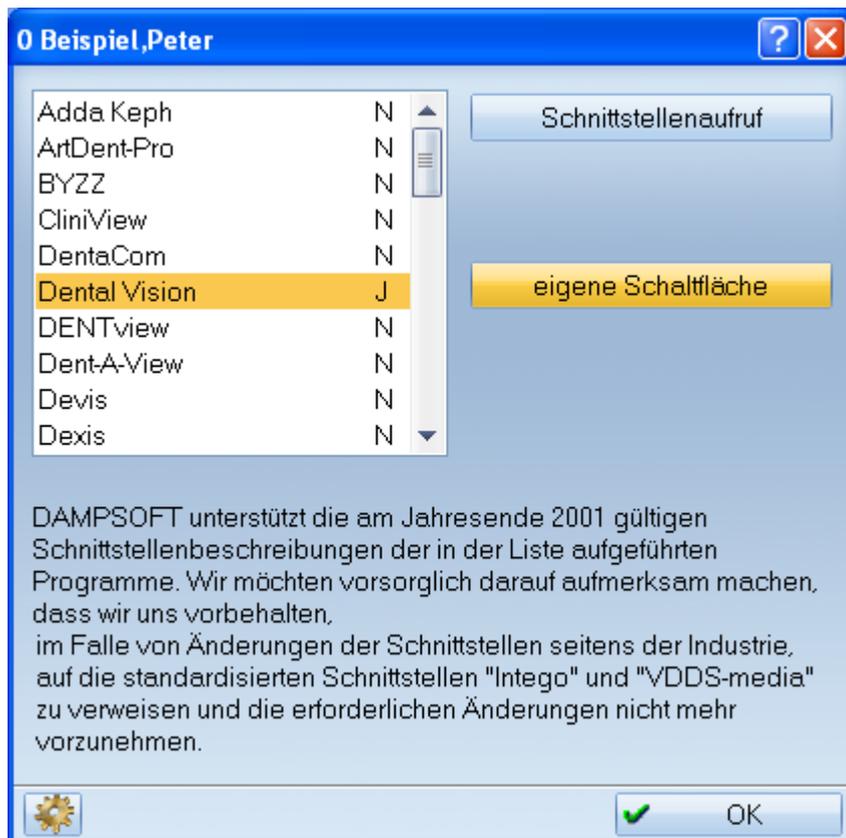

DS-Win starten → Einstellungen → Sonstige Einstellungen → Patientendatenexport (mit gedrückter Shifttaste) → Dental Vision auswählen

Patientendatenexport

Patientendaten

Nr.	Inhalt	Trennung	Nr.	Inhalt	Trennung
<input type="checkbox"/>	Name		<input type="checkbox"/>	Pat.Nr.	
<input type="checkbox"/>	Vorname		<input type="checkbox"/>	Rechn. an	
<input type="checkbox"/>	Geb. Dat.		<input type="checkbox"/>	Recall	
<input type="checkbox"/>	Anrede		<input type="checkbox"/>	Freiw. vers.	
<input type="checkbox"/>	Titel		<input type="checkbox"/>	Praxis	
<input type="checkbox"/>	Straße		nächste Zeile: \n Zeilenanfang: \r		
<input type="checkbox"/>	PLZ - Ort				
<input type="checkbox"/>	Telefon				

Versichertendaten

Nr.	Inhalt	Trennung	Nr.	Inhalt	Trennung
<input type="checkbox"/>	Name		<input type="checkbox"/>	MFRP	
<input type="checkbox"/>	Vorname		<input type="checkbox"/>	Verwandt	
<input type="checkbox"/>	Geb. Dat.		<input type="checkbox"/>	Arbeitgeber	
<input type="checkbox"/>	Anrede		<input type="checkbox"/>	Krankenk.	
<input type="checkbox"/>	Titel		<input type="checkbox"/>	Ost/West	
<input type="checkbox"/>	Straße		<input type="checkbox"/>	Mitglied-Nr.	
<input type="checkbox"/>	PLZ - Ort		<input type="checkbox"/>	Quartalsabr.	
<input type="checkbox"/>	Telefon				

Exportliste:

Adda Keph	N
ArtDent-Pro	N
BYZZ	N
CliniView	N
DentaCom	N
Dental Vision	J
DENTview	N
DentA-View	N
Devis	N
Dexis	N
DIGIRAY	N

Exportname: Dental Vision

Formatierung

Text voranstellen:

Text nachstellen:

Befund anhängen

Satzlänge voranstellen

Binär ASCII Bytes/Stellenzahl: 2

Exportziel

Clipboard

Dateiname: c:\windows\dentvis.int

Exename:

Buttons: Neu, Löschen, OK, Abbrechen, Rückgängig, Übernehmen

Unter Dateiname: ist das Laufwerk und der Pfad zur Datei DENTVIS.INT einzutragen.
In aller Regel c:\windows\dentvis.int

Funktion der Schnittstelle

Dental Vision muss gestartet sein!

Nach Drücken des Buttons "Dental Vision" in der Karteikarte des DS-Win wird das Dental Vision-Programm aktiviert, wobei der übergebene Patient automatisch aufgerufen wird.

Hinweis: Die Übergabe funktioniert nicht mit Patient Nr. 0. (i.allg. Peter Beispiel)

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMPSOFT
Die Zahnarzt-Software