

EINRICHTUNG DER SCHNITTSTELLE ZU SIDEXIS 4


Version: 1.9



Bei eventuellen Fragen zum Sidexis wenden Sie sich an Sirona oder an Ihren Administrator. Bei Fragen zur Einrichtung dieser Schnittstelle im DS-Win wenden Sie sich an unseren Technischen Support.

Einstellungen an den Sidexis PC's

- Sidexis starten → Zahnrad oben rechts anklicken
- Im Abschnitt "Mehrplatz" kann der Eintrag „Aufträge können hier angenommen werden“ pro Arbeitsstation gemacht werden. Die Pfadangabe zur Mailbox-Datei(SLIDA) muss hier gemacht werden.

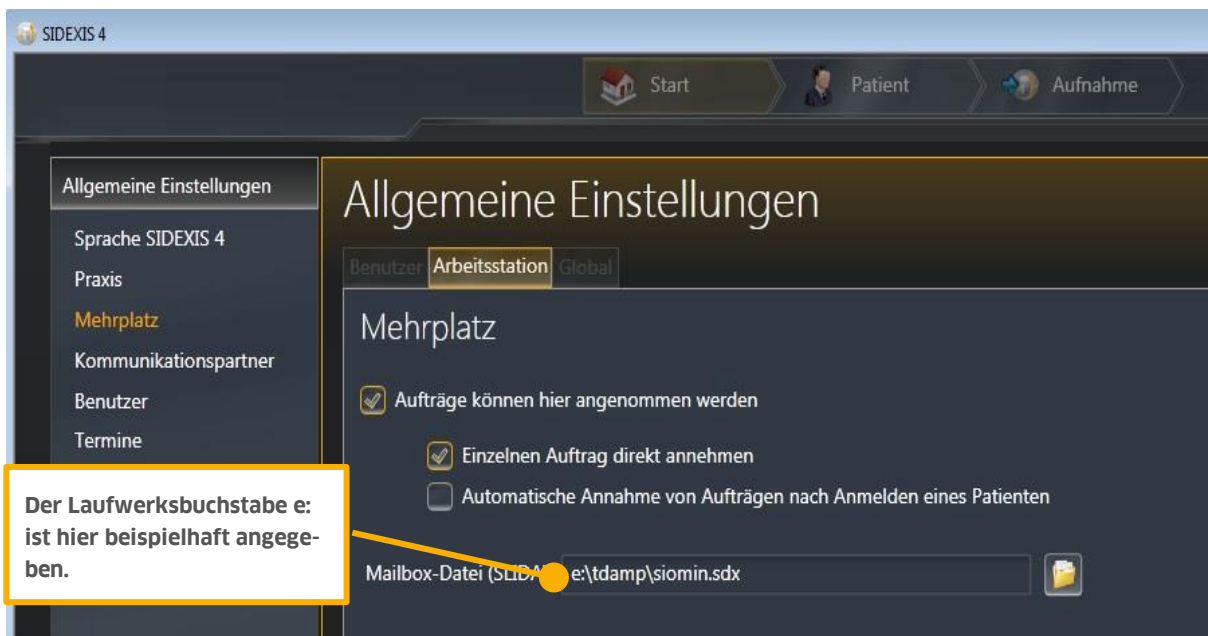

- Im Abschnitt Kommunikationspartner müssen die folgenden Einträge gemacht werden, wobei über das Button „Hinzufügen“ der neue Kommunikationspartner eingerichtet bzw. eingestellt wird:
- **Achtung:**
Die hier einzugebende Pfadangabe „Mailbox-Datei(SLIDA)“ zur Datei pm.sdx muss mit der Pfadangabe unter dem Abschnitt Mehrplatz „Mailbox-Datei(SLIDA)“ zur Datei siomin.sdx identisch sein, da ansonsten die Bildübergabe nicht funktioniert!
Sidexis4 erzeugt im Feld „Mailbox-Datei(SLIDA)“ standardmäßig eine **dampsoft.sdx**, diese muss manuell auf **pm.sdx** geändert werden!

Der Laufwerksbuchstabe e: ist hier beispielhaft angegeben.

Ab der Version 2.0.60310 muss hier ein Haken gesetzt werden, da ansonsten die Bilder in s/w in das View kommen.

Einstellungen im DS-Win (mit Multifunktionsleiste)

DS-Win starten → Einstellungen → sonstige Einstellungen → Patientendatenexport bei gedrückter Shifttaste anklicken → aus der Liste "Sidexis" auswählen → Button "eig. Schaltfläche" betätigen → hinter Sidexis steht dann ein „J“.

Patientendatenexport

Patientendaten				Versichertendaten							
Nr.	Inhalt	Trennung		Nr.	Inhalt	Trennung		Nr.	Inhalt	Trennung	
<input type="checkbox"/>	Name			<input type="checkbox"/>	Name			<input type="checkbox"/>	MFRP		
<input type="checkbox"/>	Vorname			<input type="checkbox"/>	Vorname			<input type="checkbox"/>	Verwand		
<input type="checkbox"/>	Geb. Dat.			<input type="checkbox"/>	Geb. Dat.			<input type="checkbox"/>	Arbeitge		
<input type="checkbox"/>	Anrede			<input type="checkbox"/>	Anrede			<input type="checkbox"/>	Krankenk		
<input type="checkbox"/>	Titel			<input type="checkbox"/>	Titel			<input type="checkbox"/>	Ost/Wes		
<input type="checkbox"/>	Straße			<input type="checkbox"/>	Straße			<input type="checkbox"/>	Mitglied-N		
<input type="checkbox"/>	PLZ - Ort			<input type="checkbox"/>	PLZ - Ort			<input type="checkbox"/>	Quarals		
<input type="checkbox"/>	Telefon										

nächste Zeile: \n
Zeilenanfang: \r

Exportliste:

OnyxCeph	N
OnyxCeph neu	N
OnyxView	N
PA-Sonde	N
Planmeca	N
proCompliancePICS	N
SciCan	N
Sidexis	J
Trophy	N
Trophy für Windows	N
TS-View	N

Hier ist das Laufwerk einzutragen, auf dem sich das Sidexis-Programm befindet. In aller Regel C:\Programme\Sirona\Sidexis4\Sidexis4.exe

Hier sind das Laufwerk und die Datei einzutragen, auf dem die Datenübergabe erfolgt. Diese Einstellung muss mit der im Sidexis gemachten übereinstimmen. Beispiel: e:\tdamp\siomin.sdx

Dateiname: e:\tdamp\siomin.sdx
Exename: C:\Program Files\Sirona\SIDEXIS4\Sidexis4.exe


Exportziel
 Clipboard

Eigene Schaltfläche

Bytes/Stellenzahl: 2

Neu Lösch OK Abbrechen Rückgängig Übernehmen

Dann den unten links liegenden „Zahnrad-Button“ betätigen und im Bereich “Sidexis” den entsprechenden Eintrag vornehmen:

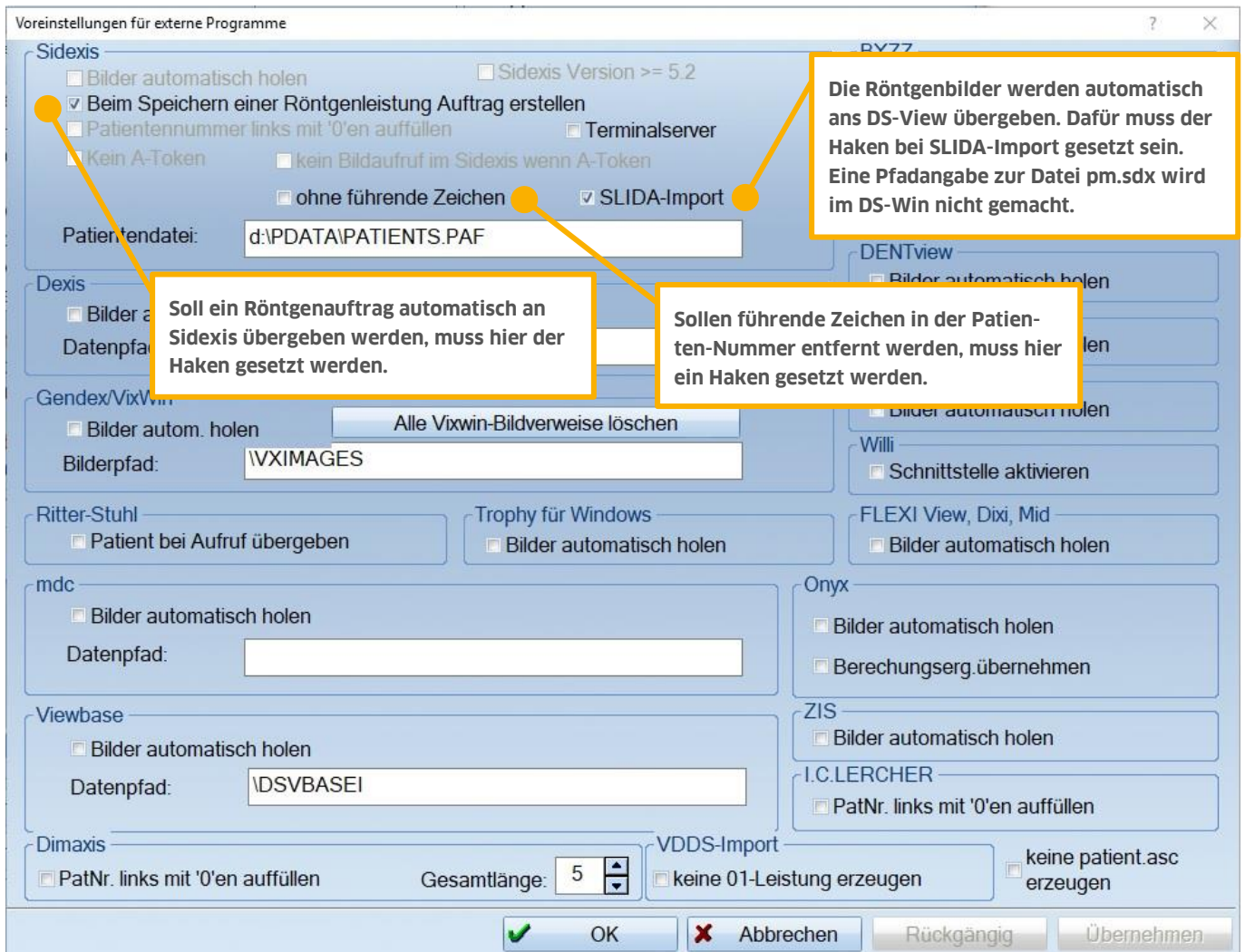

Anzeige eines OPG's in der Befunddarstellung:

- In der „Leistungserfassung“ unten links auf das Zahnrad klicken.
- Die Registerkarte „Röntgen“ auswählen.
- Unten im Fenster wird der folgende Bildausschnitt angezeigt:

Einstellungen für DS-Win-View (Zahnangabe) und Befunddarstellung

OPG-Kürzel: 18-48,11-48,55-85,51-85,OPG,OPAN,PANO,Panoramaröntgen

Rö-Kategorie: OPG,OPAN,XRAY,BISSFLÜGEL,BIßFLÜGEL,STATUS,Panoramaröntgen

- Unter „Rö-Kategorie“ und unter „OPG-Kürzel“ muss der Eintrag „Panoramaröntgen“ eingetragen werden - ohne Leerzeichen zwischen den Begriffen!!!

Funktion der Schnittstelle

- Röntgenbilder, die über das Sidexis 4 erzeugt wurden, werden automatisch an das DS-Win-View übergeben.
- Bilder, die nicht über den Röntgensensor aufgenommen wurden, werden von Sidexis derzeit nicht automatisch an das DS-Win-View übergeben.
Derartige Bilder müssen manuell im Sidexis 4 per „Bild an Kommunikationspartner senden“ übergeben werden. Das Sidexis 4 übergibt auf diesem Weg leider keine zahnbezogene Dokumentation (Zahnangabe, Befunde).
- Die Bildübergabedatei pm.sdx erwartet das DS-WIN im gleichen Verzeichnis, in der die Datei siomin.sdx abgelegt wird.
- Ein erneuter Mausklick im Sidexis 4 auf „Bild an Kommunikationspartner senden“ aktualisiert das im DS-WIN-View angezeigte Bild.
- Leider wird über die SLIDA-Schnittstelle das Sidexis 4-Bild dubliziert, d.h. es liegt zusätzlich zur Sidexis4-Datenbank als Kopie im Dampsoft-Ordner (.\\tdamp\\bilder\\slida..)!. Seitens Sirona sind keine Verbesserungen in der SLIDA-Schnittstelle geplant. Der Sirona-Support soll Anfragen zur Verbesserung von SLIDA („ähnliche Funktionalität wie vdds-media“) aber aufnehmen, sammeln und an die Sirona-Entwicklungsabteilung weiterleiten.

Alle Angaben nach dem derzeitigen Stand der Technik und bestem Wissen. Irrtum vorbehalten!

DAMPSOFT GmbH
Vogelsang 1
24351 Damp

T 04352 9171-16
F 04352 9171-90
info@dampsoft.de
www.dampsoft.de

**Pionier der Zahnarzt-Software.
Seit 1986.**



DAMPSOFT
Die Zahnarzt-Software